

セメント

トクヤママルチボンドⅡ	D-2
トクヤママルチボンドⅡ フィックスフォースプラス	D-4
トクヤママルチボンドⅡ フィックスフォース(粉)	D-4
トクヤママルチボンド	D-5
トクヤマ歯面清掃材	D-6
トクヤマエッチングゲル	D-6
エステセムⅡ	D-10
ミキシングチップ セメント用	D-11
トクヤマイオノタイトF	D-12
トクヤマ エナマジック	D-14
トクソー アイオノマー 合着用	D-15
トクヤマ ユニバーサルプライマー	D-16
メタルタイト	D-16



トクヤママルチボンドII セット

歯科接着用レジンセメント

- マルチ用途に使えるPMMA系レジンセメント。
- 高い接着性(接着耐久性)と高い靱性で、修復物の接着のみならずセメント自体に強い負荷がかかる動揺歯暫間固定、矯正用ブラケット接着の症例などにも適しています。
- 全ての被着体に使用する新開発1液プライマーの効果で、これまで複雑だった前処理が簡単で解りやすくなりました。
- 混和法、筆積み法のどちらでも使用できます。

包装 1箱=粉(クリア) 3g 1個、粉(アイボリー) 3g 1個、液 8mL 1本、プライマー 3mL 1本、ダッピンググラス(付属ラバー2個付き) 1個、スポンジ片 1箱、マルチボンドII粉計量スプーン 1本、セメントヘラ 1本、ディスポーザブルブラシ ハンドル 1本、筆積み用ディスポ筆 (N) (S) 各4本、マルチボンドIIセットケース 1個

(管理医療機器) 認証番号219AABZX00212000

※トクヤママルチボンドとは互換性がありません。



トクヤママルチボンドII 粉単品

歯科接着用レジンセメント

※X線造影性はありません。

色調 2色 クリア、アイボリー

包装 1箱=粉 3g 1個

(管理医療機器) 認証番号219AABZX00212000

※トクヤママルチボンドとは互換性がありません。

■シェード





トクヤママルチボンドⅡ 液 単品

歯科接着用レジンセメント

包装 1箱＝液 8mL 1本

(管理医療機器) 認証番号219AABZX00212000

※トクヤママルチボンドとは互換性がありません。



トクヤママルチボンドⅡ プライマー 単品

歯科接着用レジンセメント

●歯質（エナメル質、象牙質）、金属（貴金属、非貴金属）、レジン（アクリル、ハイブリッド型硬質レジン）、セラミックス※1とマルチボンドⅡを接着させる際に使用するセルフエッチングプライマー。

※1) ジルコニア製、アルミナ製を除くセラミックスは事前にシランカップリング処理が必要です。ジルコニア製、アルミナ製修復物の表面は粗造化処理を施し、シランカップリング処理は行わないで下さい。

包装 1箱＝3mL 1本

(管理医療機器) 認証番号219AABZX00212000

※トクヤママルチボンドとは互換性がありません。



トクヤママルチボンドⅡ セットケース

- トクヤママルチボンドⅡとその関連製品を収納する容器でコンパクトに使いやすく収納できます。
- 冷蔵庫で保管しやすいように、薄型にデザインしました。

包装 1個



トクヤママルチボンドⅡ 粉計量スプーン

- トクヤママルチボンドⅡ専用粉計量スプーン。
- 両端にレギュラーサイズとスモールサイズがついた計量スプーン。それぞれ必要な液滴下数をハンドル部に表示してあります。

包装 1袋＝1本

※トクヤママルチボンドとは互換性がありません。



トクヤママルチボンドⅡ フィックスフォース プラス セット

歯科動揺歯固定用接着材料/高分子ブラケット接着材及び歯面調整材

- トクヤママルチボンドⅡ フィックスフォース プラスは、動揺歯固定と矯正ブラケット接着を目的として開発したPMMA系レジンセメントです。
- 歯周疾患または外傷により動揺している歯牙の固定やブラケット接着に用いるPMMA系（粉・液）接着材料です。筆積み性に優れ、硬化がシャープなため、処置が簡単かつスピーディに行えます。

包装 1箱＝粉/ファスト クリア (3g) 1個、液 (8mL) 1本、
プライマー (3mL) 1本、
ダッペングラス (付属ラバー 2個付き) 1個、
マルチボンドⅡ粉計量スプーン 1本、
ディスポ筆 (N) 8本、ディスポ筆 (S) 8本、
ディスポーザブルブラシハンドル 1本、スポンジ片 1個

(管理医療機器) 認証番号223AFBZX00100000



トクヤママルチボンドⅡ フィックスフォース プラス 粉ファスト クリア 単品

歯科動揺歯固定用接着材料/高分子ブラケット接着材及び歯面調整材

包装 1箱＝粉/ファスト クリア 3g 1個

(管理医療機器) 認証番号223AFBZX00100000



トクヤママルチボンドⅡ フィックスフォース 粉クリア 単品

歯科動揺歯固定用接着材料

- フィックスフォース プラス 粉ファスト クリアに比べ、粘度上昇が若干緩やかになっています。


包装 1箱＝粉/ 3g 1個

(管理医療機器) 認証番号222AFBZX00089000

フィックスフォース プラスとフィックスフォースの硬化パターンの違い

硬化時間 (4分) は同じですが、硬化するまでの粘度上昇のパターンが異なります。

フィックスフォース プラスはより矯正ブラケット接着に向けた粘度上昇パターンになっています。

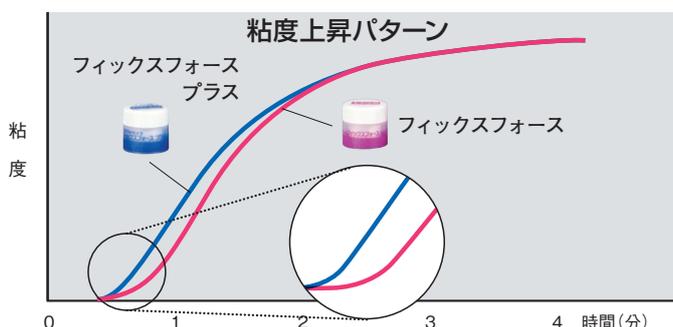



■シェード

	クリア	アイボリー	デンティン	オパーク アイボリー (ラジオオパーク)	オパーク デンティン (ラジオオパーク)
1mm厚 (口腔外での 見た目)					
120μm厚 (接着時の目安)					



トクヤママルチボンド 粉 単品

歯科接着用レジンセメント

- クリア・アイボリー
補綴物の装着、動揺歯暫間固定などに適しています。
- デンティン
歯冠色クラウンの装着時において、支台歯と近似色のセメントを使用したい場合などに適しています。
- オパークアイボリー (X線造影性あり)
歯冠色クラウンの装着時において、メタルコアの色調をセメントで遮蔽したい場合などに適しています。
- オパークデンティン (X線造影性あり)
メタルインレーの装着 (歯質へ金属色の色映り抑制) コーヌス内冠の装着。

色調 5色

クリア、アイボリー、デンティン、
オパークアイボリー (ラジオオパーク)、
オパークデンティン (ラジオオパーク)

包装 1箱=粉 3g 1個 (クリア、アイボリー、デンティン)
1箱=粉 4g 1個
(オパークアイボリー、オパークデンティン)

(管理医療機器) 認証番号21300BZZ00366000

※トクヤママルチボンドⅡとは互換性がありません。

トクヤママルチボンド 液 単品

歯科接着用レジンセメント

包装 1箱=液 8mL 1本

(管理医療機器) 認証番号21300BZZ00366000

※トクヤママルチボンドⅡとは互換性がありません。

トクヤママルチボンド プライマー 単品

歯科接着用レジンセメント

- 歯面処理材。(トクヤママルチボンド専用)
※マルチボンドを歯質と接着させるときに、歯質に対して接着効果を発揮するプライマーです。被着体がレジンやセラミックスの場合は、それぞれに効果のあるプライマーを使用します。

包装 ・プライマー A 1箱=3mL 1本
・プライマー B 1箱=3mL 1本

(管理医療機器) 認証番号21300BZZ00366000

※トクヤママルチボンドⅡとは互換性がありません。



トクヤマ歯面清掃材

歯科用エッチング材


- 動揺歯暫間固定・矯正ブラケット接着時等に使用するエナメル質表面の清掃材。
- 機械的な清掃後、除去しきれない歯質に付着する歯石等を化学的に除去します。
- 歯面清掃の進行状況を色調変化によって把握でき、色変化後、水洗します。(緑色から水色への変化)

※ 接着を目的とする歯面清掃に限定して下さい。ホワイトニングやPMTCを意図する歯面清掃には使用できません。

※ 化学的に除去できなかった強固に付着している歯石等は、水洗後、染め出し効果で確認できますので、再度、機械的に除去して下さい。

包装 1箱=5mL 1本

(管理医療機器) 認証番号21500BZZ00681000

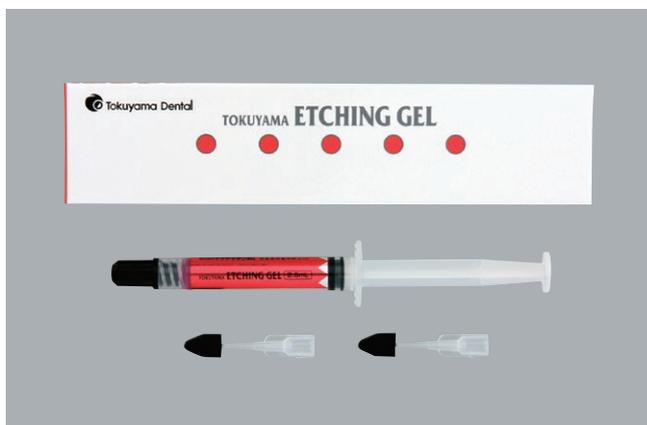

トクヤマエッチングゲル

歯科用エッチング材

- エナメル質、象牙質、歯科修復物のエッチングまたは清掃に使用します。
- ゲル状なので垂れずスポット的にエッチングすることができます。
- リン酸濃度 39±2wt%

包装 1箱=エッチング材 2.5mL 1本、チップ 2個、シリコンキャップ 2個

(管理医療機器) 認証番号219AFBZX00187000




トクヤマ歯面清掃ブラシ

歯科予防治療用ブラシ

- 歯面の清掃と研磨に用いるブラシ。
- ナイロン製。

包装 1袋=12本

(一般医療機器) 届出番号13B1X10098020008

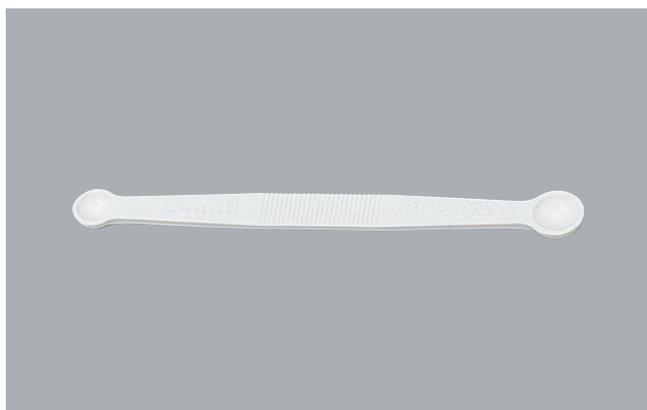


トクヤママルチボンド 粉計量スプーン

- トクヤママルチボンド専用粉計量スプーン。
- 両端に、レギュラーサイズとスモールサイズがついた計量スプーン。それぞれ必要な液滴下数も併せて表示してあります。

包装 1袋=1本


※ トクヤママルチボンドⅡとは互換性がありません。

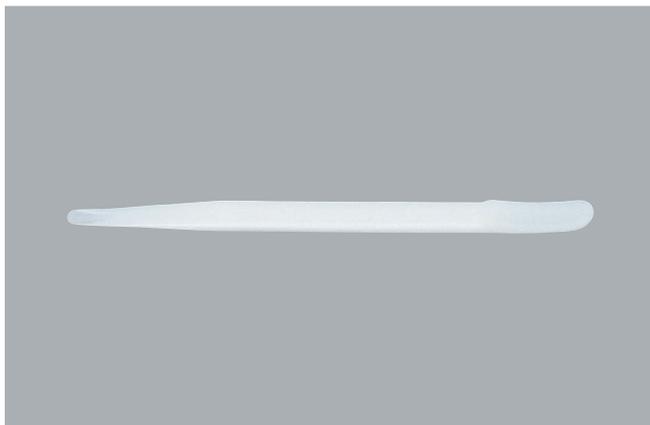

□ スパチュラ No.001

- トクヤママルチボンド、トクヤマリベースⅡ、ソフリライナータフの付属品として使用しているものです。
- 混和したセメント泥がすくいやすいように、両端が大小のスプーン状になったスパチュラです。


包装 1袋=1本

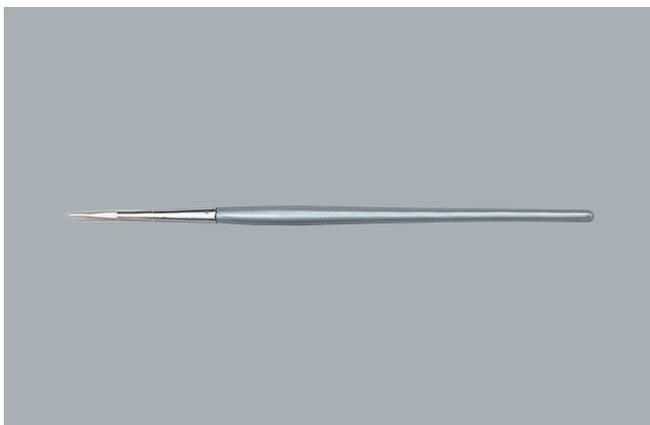

□ 筆(直・シルバー) セット

- トクヤママルチボンドの付属品として使用しているものです。

包装 1袋=4本

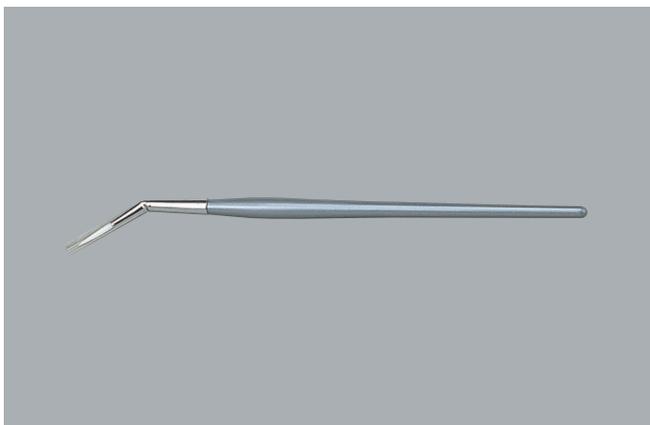

□ 筆(曲・シルバー) セット

包装 1袋=4本



■ 使用例

□ ダッピンググラス(6穴皿)

- プラスチック製ダッピンググラス。
- ラバーを取り付けて使用することでダッピンググラスへのセメントの付着・固化を防止し、ラバー内でセメントが固化しても簡単に清掃できます。

※ 単品販売分には、ダッピンググラスラバーは付属しません。

包装 1箱=1個 (ラバーなし)




ダッペングラス(6穴皿) ラバー

- 交換用ダッペングラスラバー。(ブルー)
- ダッペングラス(6穴皿)専用。



混和皿(ダッペングラス6穴皿)への固化したセメントの付着を防止することができます。また、軟らかい材質のため、清掃も楽にできます。


包装 1袋=10個

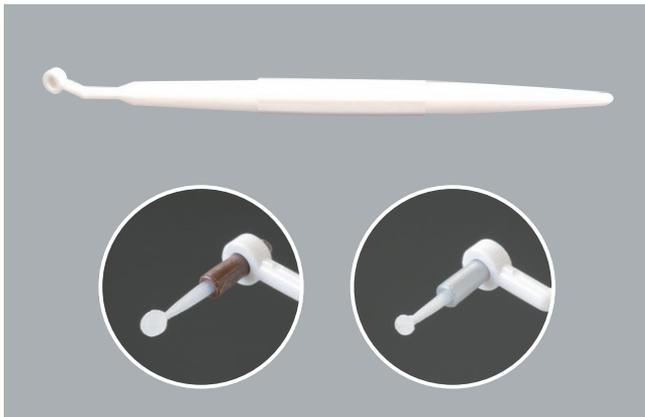

ディスポーザブルブラシ ハンドル

- トクヤママルチボンドⅡシリーズの筆積み時に使用するディスポ筆のハンドル。
- またシーラント等で使用するディスポブラシ用のハンドルとしても使用できます。

包装 1袋=1本

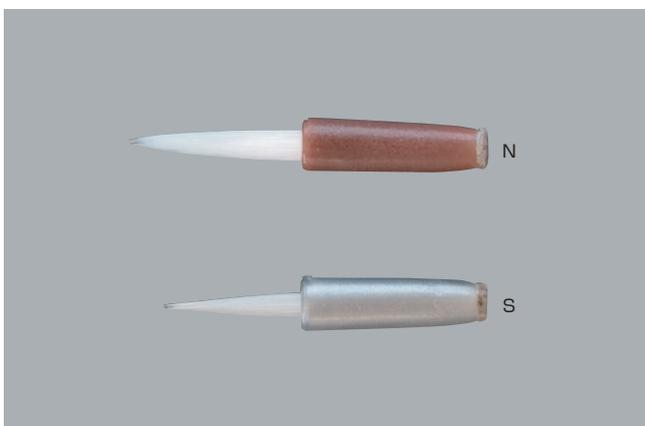


トクヤマ筆積み用ディスポ筆(N)(S)単品

- トクヤママルチボンドⅡシリーズの筆積み時に使用する筆。
- ナイロン毛で、筆積みしやすいよう毛先に特殊加工を施しています。筆先はディスポタイプです。


包装 1袋=ディスポ筆 50個 (25個×2袋)

混和法（標準粉液比）による硬化パターンの違い（37℃）

■トクヤママルチボンド

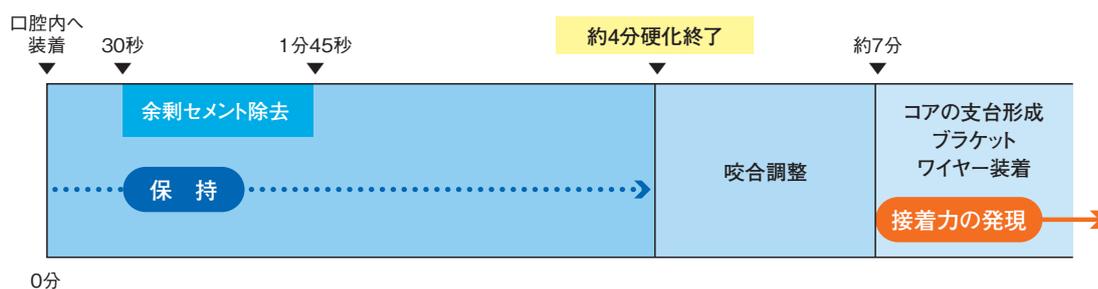

■トクヤママルチボンドⅡ

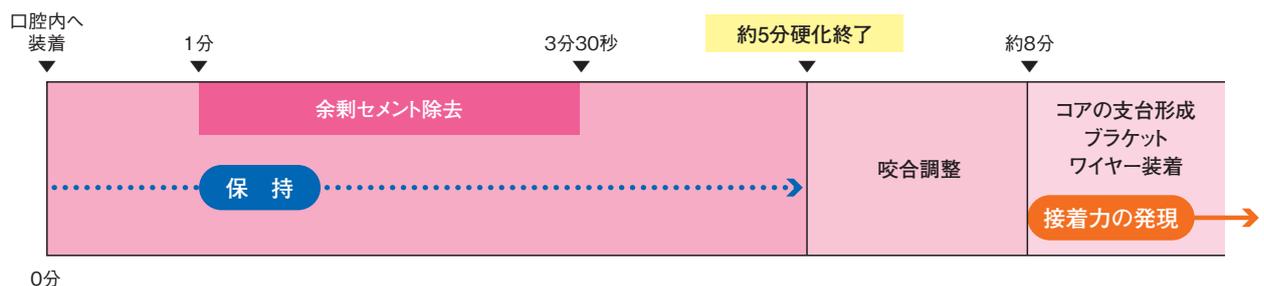

- ・ 症例、室温、口腔内環境、粉液比などの諸条件により多少異なる場合がありますので、目安として下さい。
- ・ 詳細は製品添付の使用説明書等をお読み下さい。



エステセムII オートミックス ボンドマー ライトレスII セット

歯科接着用レジンセメント

- 補綴・修復物を装着する際に使用するデュアルキュア型の接着性レジンセメントです。
- ペーストの色調は4色。各種審美修復材料（歯科用陶材・セラミックス・レジン系材料）の装着に適した接着性および理工学物性を有しています。糸引きが少なく、フローが良いのに垂れにくいペースト性状です。（X線造影性あり。）
- オートミックスペーストは手練和不要で気泡混入の少ないペーストが得られます。
- 歯質および補綴物の前処理材に「ボンドマー ライトレスII」を採用しました。

色調 ユニバーサル（クリア・ブラウン・ホワイトオパールは単品のみ）

包装 1箱＝ペーストA/B（ユニバーサル）
各2.3mL（各4.7g）1本、
ボンドマー ライトレスII A液 3mL 1本、
ボンドマー ライトレスII B液 2.4mL 1本、
ミニブラシ（ファイン）25本、
ミキシングチップ セメント用 20個、
ボンドマー用混和皿 1個、
1穴ディスポ混和皿 5個

（管理医療機器）認証番号228AFBZX00129000



エステセムII ハンドミックス ボンドマー ライトレスII セット

歯科接着用レジンセメント

- 練和性に優れ、オートミックスタイプと比較してペーストの無駄を少なくできます。

色調 ユニバーサル（クリア・ブラウン・ホワイトオパールは単品のみ）

包装 1箱＝ペーストA/B（ユニバーサル）
各2.3mL（各4.7g）1本、
ボンドマー ライトレスII A液 3mL 1本、
ボンドマー ライトレスII B液 2.4mL 1本、
ミニブラシ（ファイン）25本、
ボンドマー用混和皿 1個、
1穴ディスポ混和皿 5個、
練和紙（No.10）1冊、
セメントヘラ 1本、

（管理医療機器）認証番号228AFBZX00129000



ユニバーサル

クリア

ブラウン

ホワイトオパーク

エステセムII オートミックス ペースト単品

歯科接着用レジンセメント

- ユニバーサル
幅広く使用できるシェードです。歯質との色調適合性に優れています。
- クリア
下地の色調を活かせるシェードです。ベニア、オールセラミックスクラウン等で使用します。
- ブラウン
デンチン色を有するシェードです。セラミックス、レジン製インレー、クラウンに適します。
- ホワイトオパーク
遮蔽性が高い、白色系シェードです。歯質や金属の色調を遮蔽したいベニア等で使用します。

色調 4色 ユニバーサル、クリア、ブラウン、ホワイトオパーク

包装 1箱=ペーストA/B 各2.3mL (各4.7g) 1本

(管理医療機器) 認証番号228AFBZX00129000



エステセムII ハンドミックス ペースト単品

歯科接着用レジンセメント

色調 4色 ユニバーサル、クリア、ブラウン、ホワイトオパーク

包装 1箱=ペーストA/B 各2.3mL (各4.7g) 1本

(管理医療機器) 認証番号228AFBZX00129000




ミキシングチップ セメント用

歯科用練成器具

- エステセムII オートミックス用のミキシングチップです。
ムラなく練和でき、かつ、ペーストの無駄を最小限に抑えられるよう、チップ内残量を少なくしています。

包装 1袋=40個

(一般医療機器) 届出番号08B2X00011000115

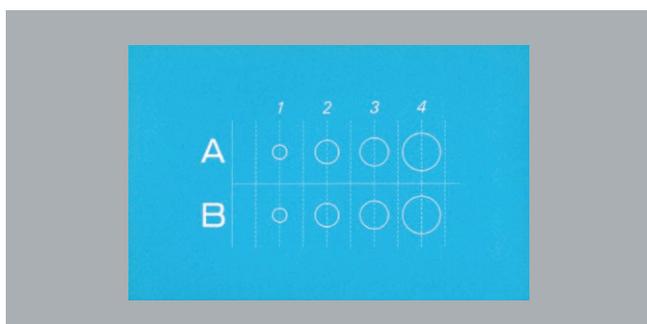

練和紙 No.10

- エステセムIIの付属品として使用しているものです。

サイズ 55mm×85mm

包装 1袋=1冊 (60枚×1)



トクヤマイオノタイトF セット

歯科接着用レジンセメント

- 補綴・修復物を装着する際に使用する接着性レジンセメント。
- 歯質に効果のある接着性モノマー（リン酸モノマー）と、貴金属に効果のある接着性モノマー（MTU-6）を含有しています。
- 水の影響をほとんど受けず硬化します。
- 被膜厚さ：5μm（ISO4049に準じる）
- 球状粒子の採用で、粉液の馴染みも良好で練和も簡単です。

包装 1箱＝粉 20g 1個、液 6.4mL 1本、
粉計量スプーン 1本、練和紙 No.40 1冊、
練和紙用スベリ止めシート 1枚

（管理医療機器） 認証番号21500BZZ00446000



トクヤマイオノタイトF 粉 単品

歯科接着用レジンセメント

包装 1箱＝粉 20g 1個

（管理医療機器） 認証番号21500BZZ00446000



トクヤマイオノタイトF 液 単品

歯科接着用レジンセメント

包装 1箱＝液 6.4mL 1本

（管理医療機器） 認証番号21500BZZ00446000



トクヤマイオノタイトF 3-3パック

歯科接着用レジンセメント

- トクヤマイオノタイトFのお得なトリプルパックです。

包装 1箱＝粉 20g 3個、
液 6.4mL 3本、
練和紙 No.40 3冊

（管理医療機器） 認証番号21500BZZ00446000



練和紙 No.40

- トクヤマイオノタイトF セット、トクヤマイオノタイトF 3-3パックの付属品として使用しているものです。

サイズ 75mm×88mm

包装 1パック=1冊 (100枚×1)



練和紙用スベリ止めシート

- 練和紙の裏に貼り付けて使用すれば、セメント練和時、練和紙が安定し操作しやすくなります。
- 簡単にはがすことができ、貼り付け面がベタベタすることはありません。

包装 1袋=1枚



セメントヘラ

- 適度なコシがあり、操作しやすいセメント練和用ヘラです。

包装 1袋=1本



トクヤマ エナマジック 粉 単品

歯科動揺歯固定用接着材料

包装 1箱=粉 8g 1本

(管理医療機器) 認証番号20800BZZ00360000



トクヤマ エナマジック 液 単品

歯科動揺歯固定用接着材料

包装 1箱=液 8mL 1本

(管理医療機器) 認証番号20800BZZ00360000



トクソー毛筆セット No.11

●トクヤマ エナマジック、トクソーリベースMRボンド
用※

※トクソーリベースMRボンド 筆No.11S 単品未発売。
毛筆セットNo.11と同様の毛先で、柄の短いタイプ。毛筆セット
No.11で代用下さい。

包装 1袋=4本 (P112に実物大)



トクソー毛筆セット No.21

●トクヤマ エナマジックの付属品として使用しているも
のです。

包装 1袋=4本 (P113に実物大)



トクソー アイオノマー 合着用 セット

歯科合着用グラスポリアルケノエートセメント

- 補綴・修復物を装着する際に使用する合着用アイオノマーセメント。
- 硬化パターンがシャープなため、初期硬化段階での水や唾液による物性の低下が減少します。
- セメント自体が持つ機械的強度が高いため、十分な嵌合力が期待できます。
- 圧縮強度：166MPa 被膜厚さ：16 μ m

包装 1箱＝粉末 36g 1本、
液 20g 1本、
粉末計量スプーン 1本、
練和紙 No.20 1冊

(管理医療機器) 認証番号20200BZZ00378000



トクソー アイオノマー 合着用 粉末 単品

歯科合着用グラスポリアルケノエートセメント

包装 1箱＝粉末 36g 1本

(管理医療機器) 認証番号20200BZZ00378000



トクソー アイオノマー 合着用 液 単品

歯科合着用グラスポリアルケノエートセメント

包装 1箱＝液 20g 1本

(管理医療機器) 認証番号20200BZZ00378000



練和紙 No.20

- トクソー アイオノマー 合着用 セットの付属品として使用しているものです。

サイズ 84mm×106mm

包装 1パック＝1冊 (50枚×1)



トクヤマ ユニバーサルプライマー セット

歯科セラミックス用接着材料／歯科金属用接着材料

- 補綴物・修復物の前処理材。
- 金属やポーセレン、コンポジットレジンはもちろん、ジルコニア、アルミナ、CAD/CAM冠といった様々な素材の前処理材として、ボンディング材やレジンセメントと強固に接着します。
- 前装冠の修理や義歯作製等、異なる材質が混在する場合に、塗り分け不要で煩雑な前処理材選びを単純化できます。

包装 1箱＝プライマー A 2mL 1本
プライマー B 2mL 1本

(管理医療機器) 認証番号224AFBZX00052000



トクヤマ ユニバーサルプライマー 単品

歯科セラミックス用接着材料／歯科金属用接着材料

包装 ・プライマー A 1箱＝2mL 1本
・プライマー B 1箱＝2mL 1本

(管理医療機器) 認証番号224AFBZX00052000



メタルタイト

歯科金属用接着材料(貴金属用)

- 貴金属とレジンとを接着させるプライマー。
- 自社で開発したモノマー「MTU-6」を採用し、貴金属と化学的に結合、レジンとは共重合して強い接着力を発揮します。
- 口腔内外で使用可能。

包装 1箱＝5mL 1本

(管理医療機器) 認証番号21000BZZ00115000